
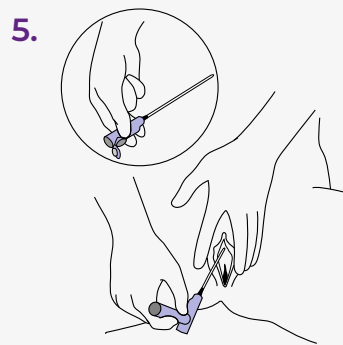
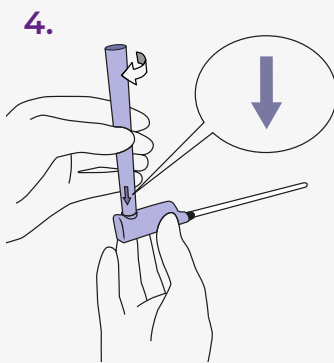


Guide rapide LoFric Elle

Scannez pour
des instructions
détaillées

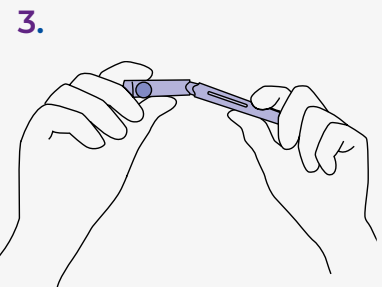

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
2. Ouvrez le capuchon supérieur.
3. Tenez la sonde dans une main et pliez légèrement la partie supérieure pour l'ouvrir. Sortez la sonde.
4. OPTION : la sonde peut être utilisée avec ou sans la poignée. La poignée permet une prise meilleure et un sondage plus hygiénique. Connectez le réservoir sur la sonde par un simple quart de tour, assurez-vous que la flèche sur le réservoir pointe vers le bas.
5. Inclinez votre bassin vers l'avant, écartez et soulevez les lèvres, le méat urétral est situé juste au-dessus de l'ouverture du vagin.

Avec l'autre main, insérez doucement la sonde dans votre méat jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler, insérez légèrement plus pour s'assurer que les deux oeilletons sont dans la vessie.

Lorsque le flux d'urine ralentit, retirez doucement la sonde. Si l'urine recommence à s'écouler, arrêtez de retirer la sonde et attendez que l'écoulement s'arrête pour assurer une vidange complète de la vessie.

6. Remettez la sonde dans le réservoir. Jetez le tout, ou transportez-le dans votre sac jusqu'à jeter le tout. Veuillez noter : le réservoir inférieur est recyclable.

Important

Sonde urinaire hydrophile LoFric® Elle™ à usage unique.

Pour le sondage urinaire intermittent à court et long terme.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.

Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l'éducation sur la pratique du sondage.

Pour plus d'informations et des instructions complètes, veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans l'emballage.

N'hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : juin 2024.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)
Participez aux conversations sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

wellspect.fr

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.

Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only